


	<h1>AlpRad</h1>
	<p>Radiologisches Zentrum Alpenrand</p>
<h2>Anleitung zum Öffnen der Patienten CDs</h2>	

Hier eine kurze Erläuterung für Sie zum Auslesen der Patienten-CD:

Voraussetzung ist ein installiertes Java Programm auf Ihrem Computer (kostenlose Software!)

Nach Einlegen der CD ins Computerlaufwerk sollte das Fenster für das Programm zur Bildbetrachtung selbständig starten:

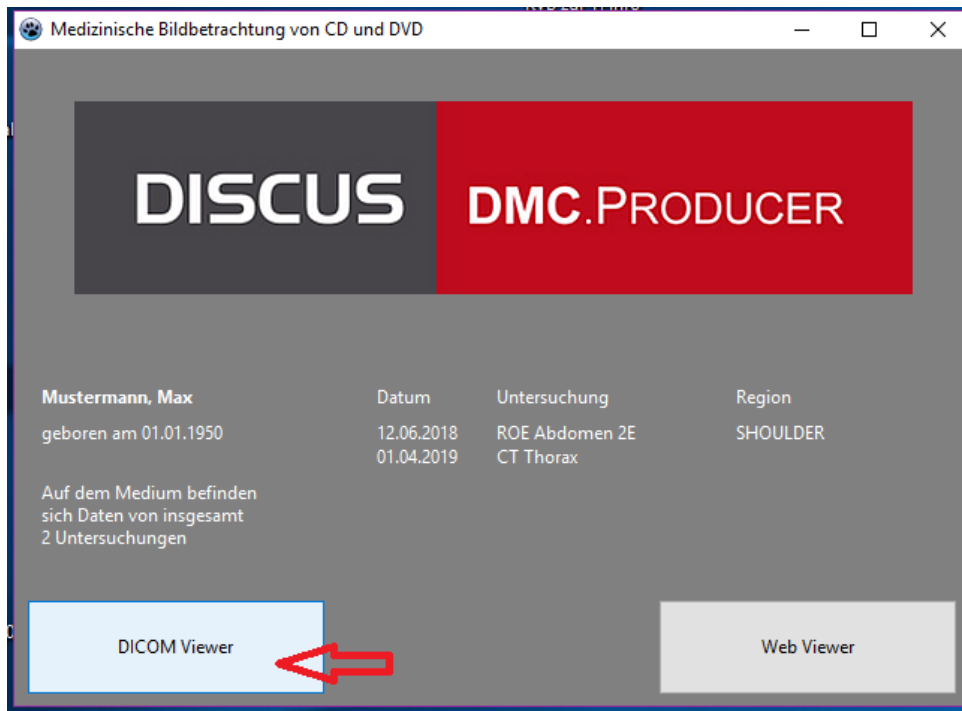


Hier auf das Feld DICOM Viewer klicken- das Programm öffnet sich.

Falls nicht :

Kann es auf „Dieser PC“ im DVD-RW.Laufwerk mit Doppelklick aufrufen werden

:

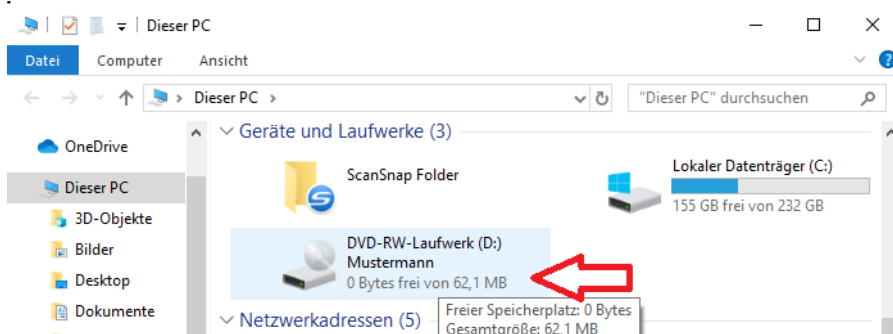




# AlpRad


Radiologisches Zentrum Alpenrand

## Anleitung zum Öffnen der Patienten CDs

In dem Programm können Sie mit der rechten Maus und in der Kopfleiste viele Funktionen einstellen

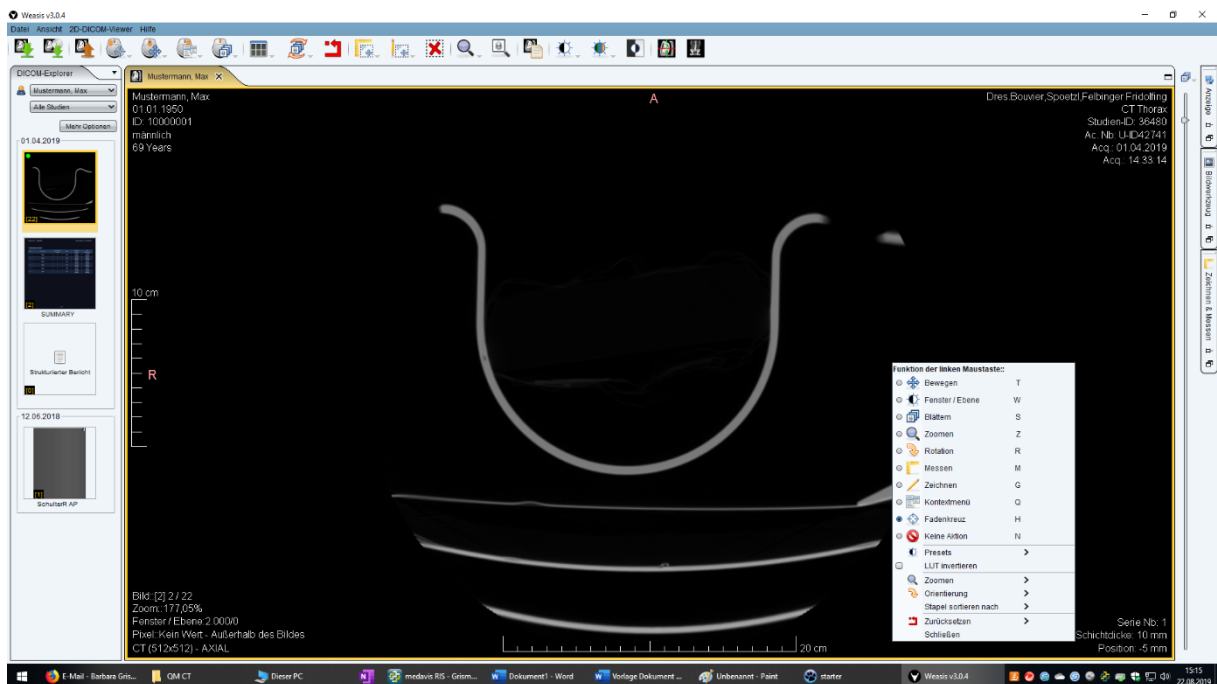

Auch am rechten Bildrand sind Bildwerkzeuge wie Messen/Zeichnen, Anzeige etc zu finden:

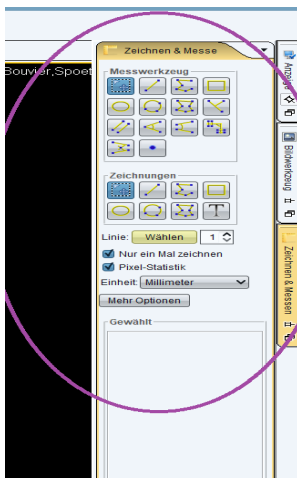



# AlpRad

Radiologisches Zentrum Alpenrand

## Anleitung zum Öffnen der Patienten CDs

Viele Befehle können Sie auch über die Tastatur der linken Maus zuordnen:

T	Fenster verschieben
W	Window/Level- Grauwert einstellen
S	Serie blättern
Z	Zoom
R	Rotation
C	Cine Start/Stopp
M	Messen
D	Abstandmessung
A	Winkelmessung
Q	Kontextmenü
Strg+Leer	Wechsel zur nächsten Funktion
0123....	DICOM presets
Leertaste	Anzeigen/Ausblenden der Annotations
Rechtsklick	Kontextmenü für weitere Optionen
Doppelklick	Vollbild

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unter 08621/806160 zur Verfügung.